




NETTOYAGE DE CONTENEUR

M-LINE application

imwt[®]
a TECNIPLAST company
PHARMA

NETTOYAGE DE CONTENEUR

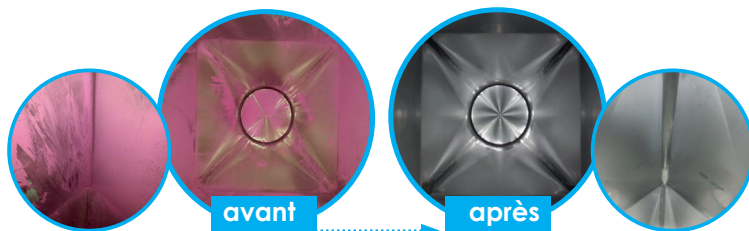

Si vous devez ...

- ▶ Nettoyer automatiquement des IBS de plusieurs tailles
- ▶ Minimiser les risques de contamination croisée grâce à un processus de nettoyage automatisé
- ▶ Réduire l'espace de stockage grâce à la réduction des temps d'arrêt pour le nettoyage
- ▶ Réduire la consommation d'eau et de détergent

IWT a la solution parfaite de nettoyage pour vous : M-LINE, LAVEUR HAUTE-PRESSION MOBILE

- ▶ Une lance hydrocinétique pour s'adapter à plusieurs tailles de conteneurs
- ▶ Couvercle pour contenir les éclaboussures d'eau et permettre le nettoyage du bord du regard
- ▶ Produit collant non hydrosoluble : Résultats de la validation du nettoyage :
 - 2 min de temps de lavage avec un détergent alcalin à 0,1 % de concentration
 - 4 min de rinçage avec PW
 - Consommation d'eau de 240 l
 - Conforme au contrôle de conductivité en ligne
 - Conforme au contrôle TOC du laboratoire
- ▶ Réduction de la consommation d'eau et de détergent : grandes économies dans les traitements des effluents

pour en savoir plus :

contact@tecniplast.fr | www.iwtpharma.fr